

Каталог товарів

Каталог товарів чеського виробника
“**Dostupné Pomůcky**” доступних на
ринку України через офіційного
дистриб'ютора:
Товариство з обмеженою
відповідальністю «ШОВКОВИЙ МІСТ»

«**Silk Bridge**» s.r.o.

Email: silkbridgetd@gmail.com

Тел: +380 67 281 3302





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Premium Care

Водонепроницна
підкладка з внутрішнім
абсорбуючим шаром



1000+

Вироблених
підкладок

1000+

Задоволених
покупців

ПАРТНЕРИ-КЛІЄНТИ

сьогодні ми співпрацюємо з понад 90 медичними закладами для людей похилого віку по всій Чеській Республіці.



Domov
třetího věku



Domov
pro seniory
Nová slunečnice



Domov pro
seniory Kladno



Антибактеріальний та протигрибковий текстильний матеріал

Матеріал має антибактеріальні та протигрибкові властивості, підтверджені лабораторними випробуваннями.

Антибактеріальна активність

- Тест-мікроорганізм: Staphylococcus aureus (ATCC 6538, Gram +)
- Метод визначення: метод підрахунку колоній (plate count method)
- Час контакту: 24 години
- Результат:
- логарифмічне зниження кількості бактерій >3,40 log
- зниження бактеріального навантаження >99,9 %
- кількість життєздатних бактерій після інкубації: <10 CFU/см²
- Підсумкова оцінка: Effective

Протигрибкова активність

- Тест-мікроорганізм: Aspergillus niger (ATCC 6275)
- Інкубація: 28 ± 1 °C, 7 діб
- Живильне середовище: Sabouraud 4 % Glucose Agar
- Діаметр зразка: 3,8 см
- Результат:
- ріст грибків не виявлено
- зона інгібування — не виявлена
- Підсумкова оцінка: Effective

Zone of inhibition (mm) ⁽¹⁾	Growth of microorganisms ⁽²⁾	Result
Was not observed	Was not observed	Effective

⁽¹⁾ Inhibition area around the width of clear zone surrounding test specimen (mm)
⁽²⁾ Growth microorganisms on the fabric not observed

Microorganism	Aspergillus niger (ATCC 6275)
Incubation conditions	28±1°C
Incubation periods	7 days
Diameter of test specimens	3.8 cm
Culture medium	Sabouraud %4 Glucose Agar

Microorganism		Staphylococcus aureus (ATCC 6538 (Gram(+)))		
Untreated (Control) Sample	Number of Bacteria (cfu/cm ²)		Logarithmic Reduction Log (cfu/cm ²)	
	Contact time (0 h)	After incubation (24 h)	Log (U ₀)	Log (U _t)
	1.2x10 ⁴	1.57x10 ⁴	4.08	4.20
Treated (Test) Sample	Number of Bacteria (cfu/cm ²)		Logarithmic Reduction Log (cfu/cm ²)	
	After incubation (24 h)		Log (A _t)	
	N<10		-	
Antibacterial Activity Value		Result	Evaluation	
R= (U _t)-(A _t)		>3.40		
%R		>%99.9	Effective	
Inoculation volume		0,4 ml		
Measuring method		Plate count method		
Type of sample material		Fabric		
Size of sample		5x5 cm ²		
Incubation conditions		35 ± 1 °C, 24 ± 1 h, % 90 relative humidity		
Concentration of inoculum (CFU/ml)		5X10 ⁵		
R: Antibacterial activity U ₀ : is the logarithm of the number of viable bacteria, in cells/cm ² , recovered from the untreated test specimens immediately after inoculation U _t : is the logarithm of the number of viable bacteria, in cells/cm ² , recovered from the untreated test specimens after 24 h A _t : is the logarithm of the number of viable bacteria, in cells/cm ² , recovered from the treated test specimens after 24 h				

- Умови випробувань**
- Тип зразка: текстильний матеріал
 - Об'єм інокуляту: 0,4 мл
 - Концентрація інокуляту: 5 × 10⁵ CFU/мл
 - Умови інкубації: 35 ± 1 °C, 24 ± 1 год, відносна вологість 90 %

Призначення:
Матеріал призначений для виготовлення багаторазових текстильних виробів, що використовуються в умовах підвищених вимог до гігієни.

- Мікроорганізми:**
Тканина підтверджено ефективна проти:
- бактерій — зокрема Staphylococcus aureus (знищення >99,9 %)
 - пліснявих грибів — Aspergillus niger (ріст не виявлено)

За результатами досліджень незалежної лабораторії (Турція) було підтверджено ефективність боротьби нашої тканини з:

- Бактеріями — Staphylococcus aureus (знищено >99,9 %)
- Пліснявими грибами — Aspergillus niger (росту не виявлено)

Що ми виробляємо?



Під брендом **Dostupné
Pomůcky** ми шиємо:

- Непромокаючі підкладки для ліжка, що витримують до 300 прань
- Непромокаючі подушки для сидінь стільців, крісел та інвалідних візків
- Текстиль для гігієни, захисту та комфорту в догляді

ВЕРХНІЙ ШАР




- Тонка структура волокон забезпечує відчуття гладкості та м'якості.
- Ефективне відведення вологи та швидке висихання - до 3-х разів швидше, ніж у звичайних матеріалів.
- Стійкий до катишок та не втрачає об'єму навіть після багаторазового прання.
- Гіпоалергенний, підходить для алергіків та астматиків.
- Матеріал, який використовується в дитячих товарах.

ВНУТРІШНІЙ ШАР



- Збільшена частка віскози забезпечує міцність, гнучкість та стійкість до розривів.
- Висока здатність поглинати рідину.
- Мінімальна зміна розміру після прання (макс. 2%).

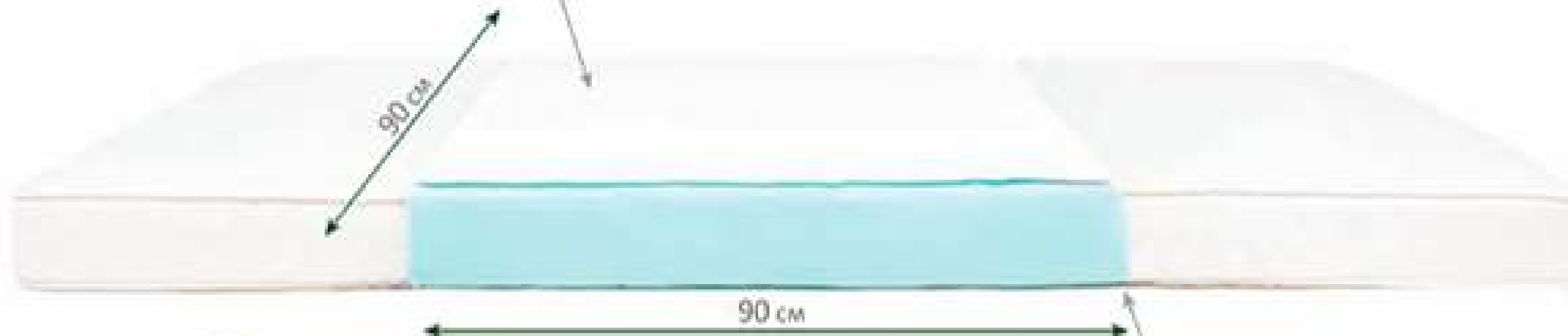


НИЖНІЙ ШАР



- Товстіша тканина з шаром PUL на зворотному боці, який не пропускає вологу, але залишається повітропроникним.
- Запобігає запотіванню та пропускає пару, що сприяє комфорту пацієнта.

НАМАТРАЦНИКИ

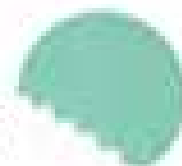

- Високоякісна бавовняна тканина з високою міцністю, яка не рветься навіть після багаторазового прання.
- Зберігає об'єм та стійкість при частому пранні.

Непромокаюча
підкладка для
ліжка



DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Ключові переваги

- **Висока поглинальна здатність**

Канавки на поверхні підкладки збільшують здатність швидко поглинати рідини та забезпечують комфорт пацієнта.

- **Неприпустимість пролежнів**

М'яка поверхня залишається комфортною навіть після багаторазового прання завдяки спеціальній конструкції волокна.

- **Протиковзкий нижній шар**

Забезпечує фіксацію підкладки, що полегшує роботу з пацієнтом.

- **Легке позиціонування**


Висока вантажопідйомність (до 135 кг) та міцні шви дозволяють часто переміщувати навіть пацієнтів з великою вагою.

- **Тривалий термін служби**

Витримує від 300 до 400 циклів прання, включаючи прання при 90°C та сушіння гарячим повітрям. Випробувано в domov pro seniory Chodov протягом 6 місяців.



Склад матеріалу

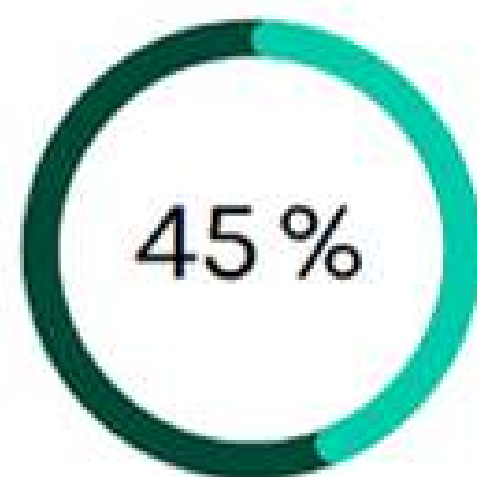

БАВОВНА



ПОЛІЕСТР



ВІСКОЗА



ПОЛІПРОПІЛЕН



РЕС

Рекомендації щодо використання підкладок



1

Кладемо підкладки на ліжко поверх простирадла прямо під лежачою людиною білим стьобаним шаром догори.

2

Барва шарів: білий верхній стьобаний -> під людину, білий нижній пухнастий -> на ліжко, зелений -> боковий під матрац

3

Для пацієнтів, які вимагають особливого догляду, ми рекомендуємо використовувати типи з текстильними крильцями, які розміщуються під матрацом.

4

Підкладку можна використовувати для позиціонування пацієнтів. Було перевірено в експлуатації, що вантажопідйомність підкладки становить до 130 кг.

5

Слідкуйте за тим, аби підложка не була пошкоджена гострими предметами або теплом

Варіанти продукту



Підкладка з крильцями

Крильця забезпечують міцне утримання підкладки на ліжку та полегшують позиціонування клієнта.

Розміри

Premium Care з крильцями = абсорбуючий шар: 90x85 см ($\pm 5\%$), розміри зі складками: 190x85 см

Склад

бавовна 45%
поліестр 25%
віскоза 20%
поліпропілен 5%
PES 5%

Підкладка без крильців

Цей варіант призначений для більш самостійних клієнтів.

Розміри

Premium Care без крильців = абсорбуючий шар: 90x85 см ($\pm 5\%$), розміри без складок: 90x85 см

Склад

бавовна 45%
поліестр 25%
віскоза 20%
поліпропілен 5%
PES 5%



Варіанти продукту



Підкладка з крильцями Alzheimer Premium Care

Крильця з кріпленням під підкладкою забезпечують надійну фіксацію підкладки на ліжку для пацієнтів, які потребують більш вимогливого догляду.

Склад

бавовна 45%
поліестр 25%
віскоза 20%
поліпропілен 5%
PES 5%

Розміри

Alzheimer Premium Care з крильцями =
абсорбуючий шар: 90x85 см ($\pm 5\%$), розміри
зі складками: 240x85 см



Зверніть увагу

- Перед першим використанням виперіть виріб за простою програмою при температурі 60 °C!
- Для звичайного забруднення оберіть програму до 60 °C для змішаних тканин, для сильнішого забруднення оберіть програму з температурою прання 90 °C.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОМ'ЯКШУВАЧ ДЛЯ ТКАНИНИ! Він негативно впливає на поглинальну здатність підкладки.
- Витримує прання при 90 °C, сушіння гарячим повітрям та прасування.





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Непромокающий защитный нагрудник для дорослих



Ключові переваги

Непромокаючий
захисний
нагрудник для
дорослих

- **Висока поглинальна здатність**

Спеціальна тканина верхньої частини нагрудника швидко вбирає рідину, забезпечуючи приємний дотик.

- **Миється та дихає**

Нижня сторона захищає одяг і матраци від бруду, паропроникна і легко переться.

- **Антибактеріальний догляд**

Забезпечує максимальну гігієнічність під час щоденного використання.

- **Безпечне та легке кріплення**

Застібка-липучка дозволяє легко та надійно закріпити нагрудник навколо шиї пацієнта.

- **Елегантний дизайн**

Доступний у нейтральному та елегантному синьому кольорі, який виглядає професійно та підходить для медичних закладів.



Властивості та склад

- Нагрудник має довжину **90 см**, що дозволяє йому закривати коліна під час сидіння, забезпечуючи достатній захист.
- **Верхня сторона:** Виготовлений зі спеціальної тканини, яка швидко вбирає рідини та швидко сохне.
- **Нижня сторона:** Матеріал, що можна прати, не пропускає рідину, але водночас є повітропроникним, що сприяє комфорту пацієнта. Цей матеріал також є антибактеріальним та протигрибковим, що забезпечує високий рівень гігієни.
- Завдяки двосторонньому дизайну ви можете вибрати, яку сторону використовувати — вбираючу чи миючу, залежно від того, яке забруднення ви очікуєте.
- **Регульований обхват шиї:** нагрудник має просту застібку-липучку, яка дозволяє легко регулювати обхват шиї та забезпечує максимальну безпеку.

Склад: 100% поліестр





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Водонепрониčná подушка для сидіння для інвалідного візка, стілця або крісла



Універсальна водонепроникна подушка для сидіння – для комфорту, захисту та чистоти щодня

- Практичний помічник у повсякденному житті - вдома, у дорозі та в догляді за близькими. Ця водонепроникна подушка для сидіння розроблена з урахуванням комфорту, гігієни та функціональності.
- ✓ Для людей похилого віку та людей з нетриманням сечі
 - Наповнювач зручний та дихаючий, поверхня приємна на дотик - ідеально підходить для тривалого сидіння.
- ✓ Легкий догляд
 - Водонепроникний шар з мембраною гарантує, що рідина не просочиться. Подушку сидіння можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C або просто витирати – вона завжди готова до наступного використання.
- ✓ Стильно та стримано
 - Сучасний вигляд непомітно впишеться в будь-який інтер'єр - будь то в домі, офісі або автомобілі.
- ✓ Прання: до 150 циклів прання без втрати функціональності
- 💧 Захист і комфорт в одному – де б вам це не було потрібно.



Ключові переваги

- **Водостійка мембрана**

Захищає від будь-якого просочування рідини.

- **Поглинаючий та дихаючий шар**

Забезпечує циркуляцію повітря та запобігає неприємному відчуттю вологості.

- **Антиалергічні порожнисті волокна**

Запобігають появі пилових кліщів та забезпечують гігієнічний захист.

- **Протикивка нижня сторона**

Забезпечує, що подушка завжди залишиться на своєму місці

- **За бажанням із зав'язками**

Є варіант з додатковими зав'язками для міцного кріплення до стільців.

**Водонепроникна
подушка для сидіння
для інвалідного візка,
стільця або крісла**



Варіанти продукту

**Непромокаюча
подушка для сидіння**

45 cm x 45 cm

Склад

поліестр 60%

бавовна 30%

PES 10%



**Непромокаюча
подушка для сидіння**

45 cm x 60 cm

Склад

поліестр 60%

бавовна 30%

PES 10%





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

**Коло для сидіння
з наповнювачем
для пацієнтів
з пролежнями
або з поперістю**



Коло для сидіння з наповнювачем – негайне полегшення під час сидіння

Ви страждаєте від болю під час сидіння? Шукаєте зручну та гігієнічну опору, яка розвантажить напружені частини тіла? Наше коло для сидіння з наповнювачем розроблено саме для таких ситуацій. З акцентом на комфорт, профілактику та підтримку загоєння

🇺🇦 Ідеально підходить для:

- людей похилого віку та лежачих людей
- пацієнтів з пролежнями або початковою попрілістю
- жінок після родів
- людей після операцій на промежині, прямій кишці або куприку

✓ Розслаблення без тиску

- Центральний отвір знімає тиск з куприка, сідниць та інтимної зони – ідеально підходить для тривалого сидіння або після процедур.

✓ Адаптивний наповнювач

- М'який, але стабільний наповнювач з порожнистого волокна забезпечує належну підтримку та зберігає свою форму навіть при частому використанні.

✓ Практична форма, легке обслуговування

- Кільце підходить для звичайних стільців, крісел та інвалідних візків. Поверхня приємна та антибактеріальна.

💬 Рекомендовано медичними працівниками та доглядальниками як простий та ефективний спосіб покращити комфорт сидіння.

✅ Чеський виробник | ✅ Підходить для домашнього та професійного догляду



Ключові переваги

- **Миючийся матеріал**

Легко чистити та підтримувати гігієнічність.

- **Повітропроникність**

Забезпечує циркуляцію повітря, що сприяє більшому комфорту.

- **Водостійкість**

Захищає від вологи та забезпечує сухість.

- **Стабільність форми**

Суміш поліестеру з силіконовими та поліуретановими паличками забезпечує кращу підтримку та довговічність.

- **Доступні розміри**

L і XL, також підходить для осіб з великою вагою.

Склад

50% суміш поліефірного
волокна з силіконом
50% стрижні
поліуретанові (PUR)

**Коло для сидіння з
наповнювачем для
пацієнтів
з пролежнями або з
попрілістю**





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Допоміжні засоби для позиціонування



<https://www.dostupnepomucky.cz>





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Допоміжний засіб — С-подібна позиціонуюча подушка



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Ключові переваги

- **М'який матеріал**

Легко чистити та підтримувати гігієнічність.

- **Повітропроникність**

Забезпечує циркуляцію повітря, що сприяє більшому комфорту.

- **Водостійкість**

Захищає від вологи та забезпечує сухість.

- **Стабільність форми**

Суміш поліестеру з силіконовими та поліуретановими паличками забезпечує кращу підтримку та довговічність.

- **Універсальне використання**

Підходить для лежання, сидіння, читання та відпочинку. Також ідеально підходить для сну на боці.

Склад

50% суміш поліефірного
волокна з силіконом
50% стрижні
поліуретанові (PUR)

**Допоміжний
засіб — С-подібна
позиціонуюча
подушка**



Допоміжний засіб — С-подібна позиціонуюча подушка

Наша С-подібна позиціонуюча подушка — ідеальне рішення для **комфортного положення всього тіла**. Цей засіб розроблений для забезпечення максимальної підтримки та комфорту під час різних видів діяльності – незалежно від того, чи хочете ви лягти, сидіти, читати, чи просто розслабитися. Завдяки своїй унікальній формі вона *повторює вигини вашого тіла* та також підходить для сну на боці.

Позиціонуюча подушка виготовлена з матеріалу, який можна прати, є водночас дихаючим та водонепроникним. Таке поєднання гарантує, що засіб залишається гігієнічним та комфортним навіть при тривалому використанні. Внутрішній наповнювач містить 50% поліестеру з силіконом та 50% поліуретанових паличок, що забезпечує кращу стабільність форми порівняно з засобами, наповненими лише поліестеровими кульками.

Наша С-подібна позиціонуюча подушка забезпечує оптимальну підтримку та комфорт для всього тіла. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає високоякісний та багатофункціональний пристрій для щоденного використання.





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Допоміжний засіб — подушка для позиціонування у формі підкови (С)



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Ключові переваги

- **Миючийся матеріал**

Легко чистити та підтримувати гігієнічність.

- **Повітропроникність**

Забезпечує циркуляцію повітря, що сприяє більшому комфорту.

- **Водостійкість**

Захищає від вологи та забезпечує сухість.

- **Стабільність форми**

Ергономічна форма для оптимальної підтримки та стабільності.

- **Універсальне використання**

Підходить для лежання, сидіння, читання та відпочинку.

Склад

50% суміш поліефірного
волокна з силіконом
50% стрижні
поліуретанові (PUR)

Допоміжний засіб —
подушка для
позиціонування у
формі підкови (C)



Допоміжний засіб — подушка для позиціонування у формі підкови (С)

Практичний допоміжний засіб для позиціонування у формі підкови (С) призначений для ефективної профілактики пролежнів та комфортної стабілізації пацієнтів як вдома, так і в професійному догляді. Завдяки своїй ергономічній формі він полегшує положення тіла, забезпечує фіксацію кінцівок або голови та значно сприяє профілактиці пролежнів та виразок стопи

Подушка наповнена спеціальним наповнювачем, що складається з суміші кулькового поліефірного волокна з силіконом (50%) та паличок PUR (50%). Ця комбінація забезпечує кращу стабільність форми, ніж кульки зі 100% PES. Наповнювач ідеально адаптується до форми тіла, підтримує вибране положення та водночас забезпечує чудову повітропроникність та комфорт. Після використання пристрій легко струсити, і він швидко відновлює свою початкову форму

Цей пристрій є ідеальним вибором для **довготривалих лежачих пацієнтів**, людей з обмеженою мобільністю або будь-кого, **хто потребує цілеспрямованої підтримки та комфорту під час лежання.**





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Універсальна позиціонуюча подушка



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Варіанти продукту

Склад

50% суміш поліефірного волокна з силіконом

50% стрижні поліуретанові (PUR)

**Універсальна
позиціонуюча подушка**

40 cm x 40 cm

40 cm



**Універсальна
позиціонуюча подушка**

30 cm x 60 cm



Універсальна позиціонуюча подушка — квадрат та прямокутник

Компактна позиціонуюча подушка, розроблена для цілеспрямованої підтримки частин тіла. Наповнювач з тонких кульок EPS легко адаптується до форми та тиску, забезпечуючи комфорт та ефективну профілактику пролежнів.

- Розміри - ідеально підходить для підтримки голови, рук, колін або щиколоток
- Наповнювач - спеціальний наповнювач, виготовлений із суміші кулькового поліефірного волокна з силіконом (50%) та паличок PUR (50%). Ця комбінація забезпечує кращу стабільність форми, ніж 100% кульки PES - вона чутливо реагує на кожен рух
- Чудове доповнення до позиціонування в домашньому та професійному догляді
- Чохол легко миється, стійкий до дезінфекції

Підходить для лікарень, будинків для людей похилого віку та домашнього використання.





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

W-подібна подушка для позиціонування



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Ключові переваги

● Природна підтримка для тіла

Спеціальне наповнення м'яко повторює форму тіла та стабілізує його в обраному положенні. Зберігає положення навіть під час невеликих рухів і забезпечує постійний комфорт.

● Легке позиціонування

Завдяки своїй гнучкості, він дозволяє швидко та дбайливе позиціонування навіть без допомоги кількох людей. Ідеальне рішення для людей, які тривалий час прикуті до ліжка або мають обмежену мобільність.

● Практично та гігієнічно

Поверхневий матеріал приємний на дотик, але водночас водонепроникний, миється та стійкий до дезінфекції. Просто протріть або виперіть подушку, і вона знову готова до використання.

● Тривалий комфорт

Подушка зберігає свою форму – достатньо злегка струсити її, і вона як нова. Наповнювач витримує часте використання, не втрачаючи своєї функціональності.

Склад

50% суміш поліефірного
волокна з силіконом
50% стрижні
поліуретанові (PUR)

**W-подібна
подушка для
позиціонування**





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

Циліндрична подушка для позиціонування



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Варіанти продукту

Склад

50% суміш поліефірного волокна з силіконом

50% стрижні поліуретанові (PUR)

Універсальна
циліндрична подушка
для позиціонування

100 см (діаметр 15 см)



Універсальна
циліндрична подушка
для позиціонування

50 см (діаметр 15 см)



Універсальна
циліндрична подушка
для позиціонування

50 см (діаметр 30 см)





DOSTUPNÉ POMŮCKY
ČESKÁ VÝROBA PRO ZDRAVÍ NA DOSAH

O-podібна подушка для позиціонування



<https://www.dostupnepomucky.cz>



Захисне пристосування для руки – безпека і комфорт для маломобільних пацієнтів

Цей практичний засіб захищає руку, зап'ястя та пальці пацієнта від пролежнів, саден та самотравм, забезпечуючи при цьому м'яку підтримку, яку оцінять не лише пацієнти, а й медичний персонал

🇺🇦 Ідеально підходить для:

- лежачих хворих
- людей з неврологічними захворюваннями або самотравмуванням
- для запобігання пролежнів на руках та суглобах
- використання в медичних закладах та домашньому догляді

✓ **М'яка підкладка та підтримуюча форма** - Спеціальна конструкція з порожнистого волокна та форма навколо всієї руки забезпечують рівномірний розподіл тиску та захист навіть під час тривалого використання.

✓ **Легко одягається завдяки ремінцю** - Еластична система затискання утримує засіб на місці - без зайвого розтягування або обмеження кровообігу.

✓ **Гігієнічна поверхня** - Виготовлена з матеріалу, який можна мити та дезінфікувати.

📏 Універсальний розмір

✅ Чеський виробник

Склад

50% суміш поліефірного волокна з силіконом

50% стрижні поліуретанові (PUR)



Контакти

Офіційним дистриб'ютором чеського виробника **“Dostupné Pomůcky”** На території України є

Товариство з обмеженою відповідальністю **«ШОВКОВИЙ МІСТ»**

«Silk Bridge» s.r.o.

Email: silkbridgetd@gmail.com

Тел: +380 67 281 3302

